

ハードキャスト

再使用禁止

【形状・構造及び原理】


・原材料：ポリプロピレン成形用及び押出用材料

【包装】

・単品包装 10枚入り

・形状

標準形状は図のとおり。

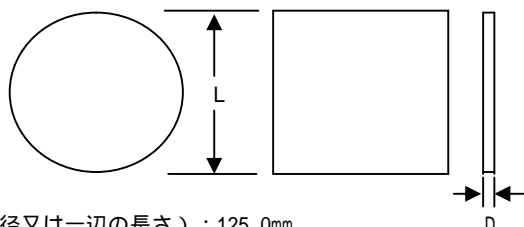

L (直径又は一辺の長さ) ; 125.0mm

D (厚さ) ; 0.4、0.6、0.8mm

【貯蔵・保管方法】

- 1) 外圧がかからないように保管する。
- 2) 加熱機器 (ストーブ等) 周辺には保管しないこと。

【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者 : 株式会社ロッキーマウンテンモリタ
住所 : 東京都千代田区神田駿河台2-2
御茶ノ水杏雲ビル14F
電話番号 : 03-5281-4711
FAX番号 : 03-5281-4716
製造業者 : ショイデンタル (ドイツ)

【使用目的、効能又は効果】

・歯科用装置 (インビジブルリテーナー、コーピング、テンポラリークラウンまたはブリッジ用印象) の作製

【操作方法又は使用方法】

- ・歯科技工用成型器 (例 バイオスター、ショイデンタル社、ドイツ) により加圧成形して用いる。
種類別の成型条件 (バイオスター、ミニスター) は下表のとおり。
但し、コード使用はバイオスター、ミニスター S scanのみ
- ・下表成型条件はあくまでも目安です。プレートに印字されている Code/バーコードを御使用下さい。
Heat (加熱時間)、Cool (冷却時間) : 単位sec

Dmm	商品番号 丸 / 角	Code	Heat	Cool
0.4	3194 / 3197	152	45	60
0.6	3195 / 3198	162	50	60
0.8	3200 / 3199	212	75	60

【使用方法に関連する使用上の注意】

成型は使用する成型器の取扱説明書に従い、行ってください。
成型の際、過加熱にご注意ください。
本品はアクリル系材料と接着しない。
本品成型の際は、通風の良い場所で行って下さい。

【使用上の注意】

1) 使用注意

本品は再使用しないこと。
本品は【使用目的】欄に記載されている以外の目的には使用しないこと。
本品は歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
万が一、製品に変形等の異常がある場合には、使用せずに弊社までご連絡ください。
本品を廃棄する場合には、「廃棄物処理に関する法律」に従い、適切に処理ください。

2) 重要な基本的注意

- ・本品の使用により発疹などの過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。